DIGITALT PERSONLIG ALKOMETER

ALCOSCAN AL6300



Oversikt

Produktet bruker en elektrokjemisk brenselcellesensor til å måle alkoholnivå. Du kan velge mellom passiv modus og målemodus. Det innebygde batteriet lades med USB-C. Status vises på en 1,3-tommers OLED-skjerm, med bakgrunnslys og lydsignal.

Produktbeskrivelse, egenskaper og funksjoner



Pakkeinnhold

Alkometer, 5 munnstykker (MP1000), USB-C-kabel og brukermanual

Bruk av apparatet

① Normal målemodus

(1) Slå på	(2) Oppvarming	(3) Blås	(4) Analyse	(5) Resultat
AL6300 CAL in 57 day	0.000 ‰	Analyzing	BLOW	WAIT 003
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(1) Hold av/på-knappen inne. Displayet viser modellnavnet og antall dager til neste kalibrering (f.eks. 57 dager).
(2) Oppvarmingen starter.
(3) Når BLOW vises, blås i munnstykket i ca. 4 sekunder.
(4) Analysen starter automatisk etter prøvetakingen.
(5) Resultatet vises, og apparatet slår seg av etter 10 sekunder. Trykk av/på mens resultatet vises for å starte ny måling. Ellers vises Power Off og apparatet slås av.

② Passiv modus
※ Manuell prøvetaking: Hvis personen ikke blåser kraftig nok, eller du vil undersøke om en drikk inneholder alkohol, trykk én gang på av/på-knappen når BLOW vises.
Etter oppvarming trykker du av/på mens BLOW vises.
Resultatet vises som PASS eller FAIL.

.. PASS .. FAIL



(1) Når apparatet er slått på og oppvarmingen er ferdig, trykker du på av/på-knappen mens BLOW vises.
Resultatet vises da som PASS eller FAIL.

Lading

① Lading (※ Apparatet kan brukes mens det lades.)
Lader Fulladet



(1) Koble USB-C-kabelen til kontakten under apparatet.
(2) Displayet viser at batteriet lades.
(3) Ved full lading vises 100 %.
(4) Når kabelen kobles fra, slås displayet av.
※ Ladeadapter: DC 5 V, 1 A (USB-C).

② Innstillinger eller måling under lading
(1) Hold brukermenyknappen inne for å åpne menyen.
(1-1) Etter 10 sekunder uten aktivitet går apparatet tilbake til lading.
(2) Trykk kort på av/på-knappen for målemodus.
(2-1) Etter 10 sekunder uten aktivitet går apparatet tilbake til lading.

Brukermeny

① Åpne brukermeny
Menyliste



(1) Hold inne av/på-knappen for å slå på apparatet.
(2) Hold inne brukermenyknappen.
(3) Apparatet åpner brukermenyen.

Menybeskrivelse


Item	Beskrivelse
Exit Menu	Avslutter brukermenyen og går til normal modus.
Results	Viser opptil 10 siste testresultater. Hvert trykk på navigasjonsknappen viser forrige resultat.
All Tests	Viser totalt antall tester utført på apparatet.
Next Cal	Viser antall dager til neste kalibrering.
Info	Viser modellnavn og fastvareversjon.

Resultater




※ Hvert trykk på navigasjonsknappen viser forrige resultat, maks. 10.

Alle tester

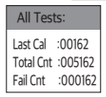

※ Last Cal: antall tester siden siste kalibrering.
※ Total Cnt: totalt antall tester.
※ Fail Cnt: øker ved positivt resultat (over innstilt grense).

Neste kalibrering

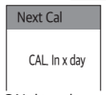

※ CAL in x day: antall dager til neste kalibrering.

Info



※ Info viser modellnavn og fastvareversjon.

Feilmeldinger

Feilvisning	Beskrivelse
FLOW	Feil ved utåndingsprøve (For lite luft. Blås jevnt og kraftig under prøvetaking.)
Bat	Lavt batterinivå (Lad apparatet.)
CAL	Kalibrering kreves. (Vises etter 1 000 tester eller 12 måneder, avhengig av hva som kommer først.)
Err	Kontakt lokalt servicesenter.
Error 2	Kontakt lokalt servicesenter.
Temperature low error	For lav temperatur (Apparatet virker ikke under +5 °C.)
Temperature high error	For høy temperatur (Apparatet virker ikke over +40 °C.)

Spesifikasjoner

Sensortype		Brenselcellesensor
Strømforsyning		Litiumpolymerbatteri (3,7 V / 300 mAh) / USB-C
Vekt		95,37 g (inkl. batteri)
Mål (mm)		122,3 mm (h) × 71,2 mm (b) × 36,3 mm (d)
Måleresultat	OLED-skjerm	0.000 ~ 5.000 g/L 0.000 ~ 5.000 ‰ 0.000 ~ 0.500 %BAC 0.000 ~ 2.500 mg/L
	Lydsignal	Null: ett kort pip Lav: flere raske, korte pip Høy: ett langt pip
Oppvarmingstid		3 sek (maks. 60 sek)
Analysetid		1–30 sek (avhenger av alkoholkonsentrasjonen)
Nøyaktighet		± 10 % ved 0,50 ‰
Bruks-/lagringstemperatur		5℃ ~ 40℃ / 0℃ ~ 50℃
Munnstykke		MP1000
Kalibreringsintervall		Hver 1 000. test eller etter 12 måneder (det som kommer først)
Sertifisering		CE
Tilleggsfunksjoner		Kalibreringspåminnelse Lagrer de 10 siste måleresultatene

Advarsler

a. Vent minst 20 minutter etter mat, alkohol eller lignende før måling. Alkoholrester i munnen og mye spytt kan påvirke resultatet. Dette gjelder også alkoholholdig munnskyll.
b. Ikke blås sigarettrøyk, spytt eller urenheter inn i munnstykket; sensoren kan skades.
c. Ikke bruk apparatet til å avgjøre om du kan kjøre etter alkoholinntak.
d. Oppbevar apparatet innenfor angitt temperaturintervall.
e. Følg instruksjonene nøye for korrekt måling.

Garanti

Produsent og distributør garanterer at produktet ved normal bruk er fritt for material- og produksjonsfeil (kalibrering unntatt) i 12 måneder fra kjøpsdato.

Garantiansvaret er begrenset til utskifting, justering eller reparasjon når gyldig kjøpsbevis følger med. Garantien bortfaller dersom apparatet er manipulert eller skadet med vilje.

Kalibrering og service

Kontakt lokalt servicesenter for kalibrering, opplæring og teknisk støtte.

Test Helsen AS