Spesifikasjoner


Målemetode	Pusteprøve til BAC
Måleområde	0,000–0,400 % BAC 0,000–4,000 ‰ 0,000–2,000 mg/l BrAC
Nøyaktighet	±0,01 % BAC opptil 0,10 % BAC
Sensor	Halvledersensor av metalloksid
Strømforsyning	2 × 1,5 V AA alkaliske batterier (inkludert)
Testkapasitet	Ca. 100–200 tester med nye batterier
Driftstemperatur	10–40 °C
Oppvarming	Under 1 minutt
Skjerm	3-sifret LCD
Mål (mm)	105 (H) × 50 (B) × 18 (D)
Vekt	98 g
Sensormodul	Byttes etter ca. 300 tester, eller ved skade som følge av feil bruk

Innhold

Innhold: Alkometer, 5 munnstykker, 2 AA-batterier, etui, håndstropp og brukermanual.



Tilvalg: 12 V DC-kabel
Kan brukes med bilens 12 V-uttak.

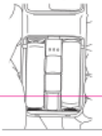

Oppbevaring av munnstykke
Ett munnstykke kan lagres i apparatet.

Garanti

Produsenten garanterer at produktet er fritt for feil i materialer og utførelse ved normal bruk i seks (6) måneder fra kjøpsdatoen.
Garantien er begrenset til reparasjon, justering eller utskifting av produktet etter produsentens vurdering. Garantien gjelder ikke ved feil bruk eller skader som skyldes håndtering.

Rekalibrering og service


For rekalibrering og teknisk hjelp, kontakt:
Test Helsen AS



Brukermanual


AL7000 er beregnet for måling av alkohol i utåndingsluft. Måleresultatet brukes ved vurdering av alkoholpåvirkning. Apparatets nøyaktighet er fastsatt for blodalkoholnivåer fra 0,000 til 0,400 % BAC. Nøyaktigheten er testet i henhold til DOT-forskrifter.

AL7000 – spesifikasjoner

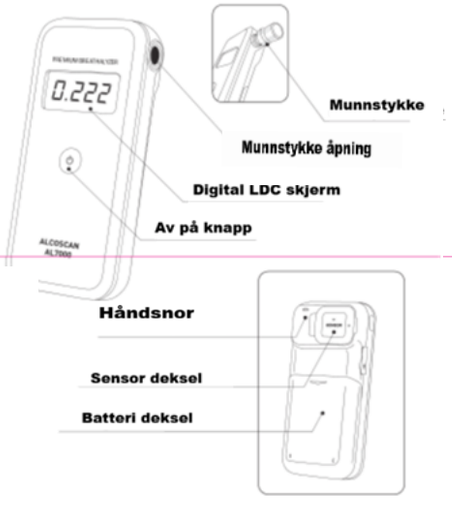

- AlcoScan AL7000 analyserer en pusteprøve for å måle
- alkohol fra lungene. Målingen beregner blodalkohol BAC.
- AL7000 benytter en avansert metalloksid-halvledersensor.

Slik bruker du apparatet

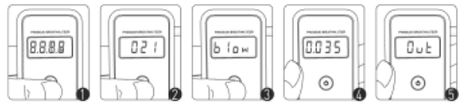


1. Trykk på av/på-knappen. Hold knappen inne for å se det samlede antallet utførte tester.
2. Vent mens apparatet varmes opp.
3. Blås i munnstykket i 4 sekunder til to pip høres.
4. Resultatet vises i 15 sekunder.
5. Apparatet slår seg automatisk av.

Trykk på av/på-knappen. Vent på oppvarming. Blås gjennom munnstykket 4 sekunder til to pip høres. Resultatet er på displayet 15 sekunder. Slår seg av automatisk.

Bytte av sensormodul

Følg trinnene nedenfor for å sette inn ny sensormodul.
Viktig: Slå av apparatet før du starter.

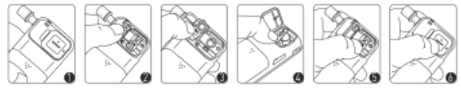

1. Åpne sensordekselet.
2. Finn sensormodulen.
3. Ta ut den gamle sensormodulen.
4. Sett den nye modulen på plass.
5. Kontroller at modulen sitter godt fast.
6. Lukk dekselet, og gjennomfør en test.

Advarsler

a. Vent minst 20 minutter etter mat eller drikke før test. Alkoholrester i munnen og mye spytt kan påvirke resultatet. Dette gjelder også alkoholholdig munnskyll og lignende..
b. Unngå sterk vind og lukkede rom. Dårlig ventilasjon kan øke oppvarmingstiden mellom tester.
c. Ikke blås røyk, spytt eller urenheter inn i munnstykket. Det kan skade sensoren.
d. Bruk aldri AL7000 som grunnlag for å kjøre etter alkoholinntak.
e. Unngå ekstreme temperaturer. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Varselmeldinger



«Flow»: Pusteprøven var for svak. Start apparatet på nytt og blås jevnt og kraftig under prøvetaking.



«CAL»: Etter mer enn 300 tester vises meldingen i 15 sekunder før oppvarming. Dette angir tidspunkt for kalibrering eller utskifting av sensormodulen.



«bat»: Lav batterispenning.
Bytt batteriene.